

OrCam Read.

INTELLIGENT ENHET SOM LÄSER TEXT PÅ ALLA YTOR.

© 2021 OrCam Technologies Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

OrCam® är OrCam Technologies Ltd. ("OrCam") och OrCam finns i denna guide och/eller andra relaterade dokument som producerats av OrCam ensam ägare till alla rättigheter och immateriella rättigheter. De där dokumenten skyddas av tillämpliga immateriella lagar, som inkluderar, utan begränsning mm. upphovsrätter, patent, designrättigheter, varumärken, know-how, affärshemligheter och internationella överenskommelser. Ingen licens beviljas härmed till användaren av denna manual eller rättigheter, och nämnda guide förblir OrCams exklusiva och exklusiva rättighet som en tillgång. Ingen del av denna manual får användas, reproduceras, översättas, modifiera, konvertera, anpassa, presentera, lagra i sökmotorn, kommunicera eller överföra för något kommersiellt syfte, såsom t.ex. försäljning, återförsäljning, distribution, för reproduktion, licensiering, uthyrning eller leasing utan tillstånd från OrCam skriftligt tillstånd.

OrCams patentkatalog finns på <https://www.orcam.com/en/patents/>.

OrCam tillhandahåller ingen uttrycklig eller underförstådd noggrannhet av innehållet i denna guide eller

ett uttalande om fullständighet eller garanti, men guiden tillhandahålls "i befintligt skick" och inte OrCam tar inget ansvar eller ansvar för någonting i detta dokument eller någonting eventuella fel eller felaktigheter i produkten som levereras med detta dokument.

OrCam-enheter är designade för att hjälpa vardagen hos personer med nedsatt syn.

De ersätter inte tidigare hjälpmetoder eller hjälpformer, och enheten bör inte användas under tillstånd som är potentiellt livshotande eller hälsofarliga eller som kan leda till ekonomisk förlust. OrCam-enheter bör inte användas särskilt när du kör bil eller använder maskiner av något slag. Se

För mer säkerhetsinformation, besök OrCams webbplats: www.orcam.com/safety.

För att kontakta OrCam Support, e-posta support@orcam.com.

Instruktioner och instruktionsvideor, tips, instruktioner och felsökningsinstruktioner finns på Internet på www.orcam.com/user-area.

Företagets huvudkontor

OrCam Technologies

5 Kiryat HaMada St.

Jerusalem 9777513

Israel

+972.2.591.7800

USA och Kanada

OrCam Inc.

1115 Broadway, 11:e våningen

New York, NY 10010

1 800 713,3741

Storbritannien

OrCam Storbritannien.

60 Gresham Street

London EC2V 7BB

0800.358.5323

Tyskland

OrCam GmbH

Gustav-Heinemann-Ufer 58

50968 Köln

+49 (0) 211 540 138 11

Kina

OrCam Shanghai Technology Consulting Co., Ltd.

奥看(上海)技术咨询有限公司

1277 W. Beijing Road Guolv Building 3 / F,

Jing'an Shanghai +8618621553619

Innehållsförteckning.


Innan du använder OrCam Read för första gången och för att säkerställa säker och korrekt användning, besök vår webbplats på www.orcam.com/user-area och läs vår omfattande OrCam Read User Guide, instruktionsvideor, tips, råd och felsökning.

Vad innehåller paketet?

1. OrCam Read-enhet
2. Snabbstartguide
3. Vägggladdare
4. Laddkabel
5. Trådbundna hörlurar
6. Halsband
7. Rengöringsduk

Vad finns i lådan?

1. OrCam Read enhet 2. Snabb bruksanvisning 3. Vägggladdare
4. Laddningskabel 5. Trådbundna hörlurar 6. Snodd 7. Rengöringstrasa

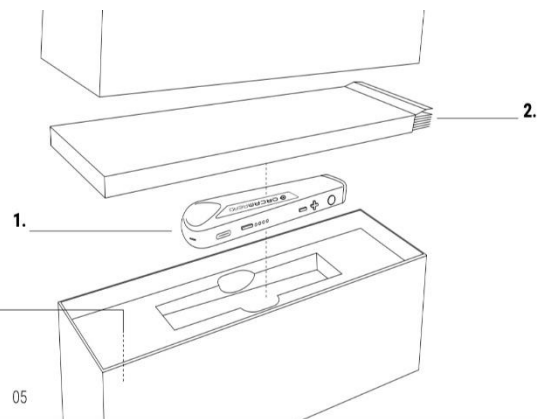

Delar och knappar.

Delar och knappar.



Komma igång.


Laddar OrCam Read.

- För att ladda OrCam Read, anslut laddningskabeln till laddningsuttaget. Anslut USB-änden av laddningskabeln till vägggladdaren. Anslut vägggladdaren till ett eluttag.
- Ladda enheten i tre timmar innan du startar den för första gången. • OrCam Read laddas helt på cirka 90 till 120 minuter.


Startar OrCam Read.

Tryck på strömbrytaren i 2 sekunder tills du hör ett pip. Mindre än en minut senare meddelar enheten: "OrCam version [xx] är klar. Batteriladdningen är [XX] procent".

Ladda

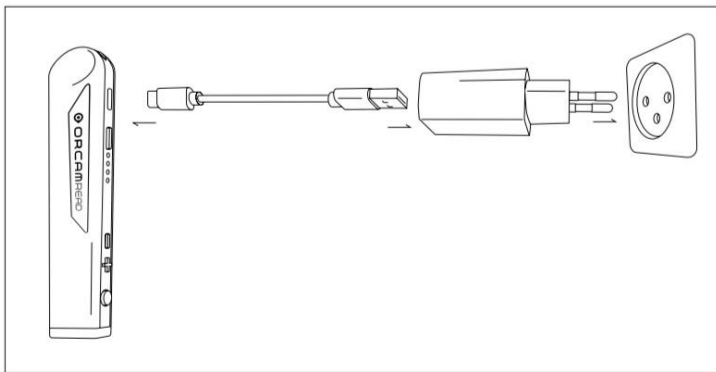

Slå på

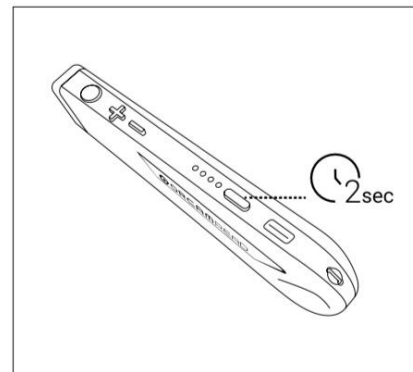

Funktioner.

Tryck på avtryckaren.

Tryck på slutarknappen en gång och OrCam Read kommer att läsa den infångade texten, känna igen streckkoder eller uppsättningar, sluta läsa eller göra val i ljudinställningsmenyn.

Tryck på avtryckaren två gånger.

Tryck snabbt två gånger på avtryckaren för att pausa eller återuppta läsningen, eller för att avsluta ljudinställningsmenyn.

Tryck på båda ljudknapparna.

Tryck på båda volymknapparna för att ändra laserpekarlägena.

Tryck på volymknappen en gång.

Tryck på volymknappen för att justera volymen, spola bakåt eller framåt i texten, eller bläddra igenom volyminställningsmenyn.

Funktioner.

Tryck på startknappen.

Tryck en gång på startknappen så läser OrCam Read den uppfångade texten, känner igen streckkoder eller sedlar, slutar läsa eller gör val i menyn för ljudinställningar.



Dubbeltryck på startknappen.

Tryck snabbt två gånger på startknappen för att pausa eller fortsätta läsa, eller för att lämna inställningsmenyn.



Tryck på båda volymknapparna.

Tryck på båda volymknapparna för att växla mellan laserpekarlägena.



Tryck en volymknapp.

Tryck på endera volymknappen för att justera volymen, spola bakåt eller framåt genom text, eller bläddra genom menyn för ljudinställningar.



Kolla in det.

Pausläge och avstängning.

När enheten är påslagen sparar batteriets livslängd om du går in i vänteläge. OrCam MyEye går automatiskt in i viloläge när enheten inte används på tre minuter och stängs automatiskt av 3 timmar efter att den gått in i viloläge.

- Tryck på strömknappen en gång för att gå in i pausläge.
- Du kan lämna viloläget genom att antingen trycka på strömknappen eller avtryckaren en gång.
- För att stänga av OrCam Read, tryck på strömknappen en gång. Du kommer att höra meddelandet "Pausar. Tryck igen för att stänga av ". Tryck på strömknappen igen.

Ställa in volymen.

- Tryck på plusknappen ("+") en gång för att öka volymen.
- Tryck på minusknappen ("-") en gång för att minska volymen.

Funktioner.

Läs eller känna igen.

OrCam Read kan läsa text och känna igen förladdade streckkoder och sedlar

1. Håll OrCam Read på plats och rikta den direkt mot texten eller streckkoden eller sedeln på ett avstånd av ca 15-35 cm. Se till att långsidan av enheten med alla dess knappar är vänd uppåt.
2. Tryck på avtryckaren. Du kommer då att höra ett ljud som påminner om kameraavfyrningen.
3. OrCam Read börjar läsa text eller känna igen en streckkod eller sedel.

Obs: Du kan läsa mer detaljerad text genom att trycka och hålla ned avtryckaren i upp till 5 sekunder. Under ett långt tryck, justera kantlaserramen eller muspekaren för att fånga den önskade texten. Om fingret inte släpps innan 5 sekunder har förflutit kommer kameran inte att aktiveras.

Kontrollera läsning.

- För att pausa och återuppta läsningen, tryck på avtryckaren två gånger.
- För att hoppa över en mening, tryck antingen på plus- ("+") eller minus-knappen ("-") en gång.
- För att sluta läsa, tryck på avtryckaren en gång.


Laserpekarlägen.

Det finns två laserpekarlägen:

- "Begränsning" för att läsa inramad text.
- "Mus" för att börja läsa från en specifik punkt.

För att växla till laserpekarläge, tryck på plus- och minusvolymknapparna samtidigt.

1 Identifiering av förladdade streckkoder och sedlar är endast tillgänglig när de köps separat.

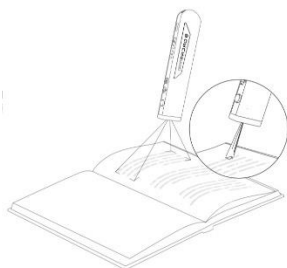

Anpassning och sammanslagning.

Ljudinställningar menyalternativ.

Du kan redigera enhetens inställningar via menyn för ljudinställningar. För att komma åt menyn, tryck och håll ned strömknappen, antingen tryck på volymknappen och släpp sedan strömknappen. När du är i menyn för ljudinställningar, lyssna noga på röstinstruktionerna. Ett tryck på avtryckaren en gång bekräftar det valda alternativet. Du kan bläddra igenom alternativen genom att trycka på någon av volymknapparna. Om du trycker på avtryckaren två gånger kommer du antingen att återgå till huvudmenyn eller stänga ljudinställningsmenyn.

Obs: För en komplett lista över tillgängliga inställningsalternativ, se OrCam Read User Guide på OrCam-webbplatsens användarområde.

Ställa in och tala om tid och datum.

- För att ställa in den interna klockan, gå till: www.orcam.com/timeset. Tryck på slutarknappen och läs kommandot "Orcam, vänligen ställ in zon och tid" på skärmen.
- För att höra aktuell tid och datum, gå till menyn för ljudinställningar. Gå till menyn Allmänna inställningar och Ställ sedan in tiden. Efter några sekunder kommer OrCam Read att tala om för dig aktuell tid och/eller datum.

Bluetooth-anslutning.

Använd en Bluetooth-anslutning för att ansluta din OrCam Read till en extern högtalare eller hörlurar.

1. I högtalaren eller hörlurarna:

a. Tryck på Bluetooth-parningsknappen. Du kommer att höra ett ljudsvar genom högtalaren eller hörlurarna.

2. På din OrCam Read-enhet:

a. Gå till menyn för ljudinställningar. Gå till menyn för anslutningsinställningar och sedan till menyn för Bluetooth-inställningar.

b. Välj "Tryck på slutarknappen för att ansluta till en Bluetooth-ljudenhet. Tryck på ljudknapparna för att komma åt andra inställningar."

c. Välj högtalaren eller hörlurarna du vill ansluta. Vissa Bluetooth-högtalare eller hörlurar säger "ansluten".

Mobil-app.

Du kan använda "OrCam Read" för att anpassa OrCam Read-inställningarna, kontrollera läsningen, hitta din enhet om den tappas bort och upprepa instruktioner om hur du använder enheten.

1. Ladda ner "OrCam Read"-appen från appbutiken på din smartphone och se till att Bluetooth-anslutningen på din smartphone är aktiverad.

2. Håll OrCam Read vertikalt med kameran riktad mot taket och nära din smartphone. Följ instruktionerna på skärmen för att para ihop enheten.

Viktigt: Appen är för närvarande endast tillgänglig för iPhone- och iPad-användare.

Obs: För mer information om att installera, para ihop och använda "OrCam Read" med OrCam Read, se avsnittet för mobilappar i OrCam Read User Guide på OrCams webbplats.

Ansluter till WiFi och mjukvaruuppdateringar.

Att ansluta din OrCam Read till ett WiFi-nätverk säkerställer att den senaste programuppdateringen är installerad på din enhet. Enheten måste också vara ansluten till laddaren under hela laddningsprocessen. Observera att OrCam Read endast stöder 2,4 Ghz WiFi, inte 5 Ghz WiFi.

Ansluta till ett WiFi-nätverk:

1. På en dator eller smartphone:

- a. Gå till www.orcam.com/wifiset.
- b. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ditt WiFi-nätverk.
- c. QR-koden visas på skärmen.

2. På din OrCam Read-enhet:

- a. Anslut OrCam Read till laddaren.
- b. Håll OrCam Read framför skärmen (cirka 12 till 16 tum (30 till 40 cm) för datorskärmen, cirka 6 till 8 tum (15 till 20 cm) för smarttelefonen) för att skanna QR-koden.
- c. Tryck på avtryckaren. OrCam Read piper och avger flera pip när en QR-kod skannas och ansluts till ett WiFi-nätverk. OrCam Read meddelar dig när den är ansluten.

Säkerhet och varningar.

- Läs dessa försiktighetsåtgärder noggrant innan du använder OrCam för att undvika farliga situationer och säkerställa att din enhet fungerar optimalt.
- Hantera OrCam försiktigt. Den kan skadas om den tappas, bränns, spricker eller krossas.
- Kontrollera OrCam för fysiska skador, såsom sprickor eller stötar i fodralet. Apparatsens yttre hölje får inte öppnas.
- Kontrollera kameranlinsen på OrCam för sprickor, skador eller repor.
- Se till att kameranlinsen inte är täckt eller smutsig. Läs rengöringsinstruktionerna nedan för att rengöra din OrCam ordentligt.
- Använd endast laddaren som medföljer OrCam. Användning av en annan laddare kan upphäva garantin och orsaka allvarlig skada eller skada på OrCam.
- Kontrollera att vägggladdaren och laddningskabeln inte är skadade eller trasiga.
- Försök inte att byta ut batteriet. Den kan skadas, vilket kan leda till överhettning och till och med skada. Batteriet är designat för att hålla i genomsnitt två år (i genomsnitt en laddningscykel per vecka), varefter det kan behöva bytas ut. OrCam är designad för att fungera i omgivningstemperaturer på 0 till 40 ° C (32 till 104 ° F) och under normala driftsförhållanden (relativ luftfuktighet 10 till 90 % och atmosfärstryck upp till 2 000 m över havet (700 hPa)). Enheten kan skadas om den är utanför dessa intervall. Förvara och transportera enheten på en sval, torr plats vid en temperatur på 0 till 40 ° C (32 till 104 ° F), en relativ luftfuktighet på 5 till 90 % och ett tryck på 700 till 1 060 hPa. Om OrCam överhettas kommer enheten att utföra en avstängningsfunktion.
- OrCam är vattenavvisande men inte vattentät. Det betyder att enheten tål lätt regn eller dropp under korta perioder, även om detta inte rekommenderas. Använd inte OrCam i eller nära kraftigt regn, stranden eller poolen, eller i badkaret eller duschen. Sänk inte ner OrCam i någon vätska. OrCam uppfyller IP-klassningen IP22.
- Tvinga inte in kontakten i porten och utöva inte överdriven kraft på knappen. Detta kan orsaka skador som inte täcks av garantin. Om kontakten inte kan installeras enkelt, kontrollera porten för hinder och se till att du har rätt kontakt för den porten. Enheten får inte anslutas till mjukvara, datorhårdvara eller andra enheter som inte tillhandahålls av OrCam. Att utsätta enheten för magnetiska fält kan skada enheten eller radera dina data.
- När du använder OrCam eller laddar batteriet är det normalt att enheten blir varm. Om enheten blir extremt varm eller läcker, eller om du känner en bränd lukt, stäng omedelbart av enheten och kontakta OrCam Support.
- Om du har några problem med att använda OrCam, eller om enheten eller någon av dess komponenter, såsom kameranlinsen eller ytterhöljets eller laddaren, är skadade eller inte fungerar, kontakta OrCam Support och försök inte reparera det själv. Endast en kvalificerad OrCam-proffs kan reparera eller serva din enhet. Obehöriga reparationer kan ogiltigförklara din garanti.
- OrCam rekommenderar att användaren undviker bakgrundsljud för att bättre höra OrCam. OrCam rekommenderar att du använder en Bluetooth-ljudenhet, till exempel ett headset, för att höra OrCam bättre i en bullrig miljö.

- Om du har några frågor om hur du använder enheten med en intern pacemaker och/eller en defibrillator och/eller ett implantat, kontakta en sjukvårdspersonal.
- Om du har en allergisk reaktion mot någon del av din OrCam, kontakta din sjukvårdspersonal.
- Använd inte din OrCam för att läsa läkemedelsetiketter.
- OrCam Read uppfyller allmänna krav i USA och EU för klass 1 medicinsk utrustning. OrCam utför en avstängningsfunktion.

Renande

Rengör OrCam om den känns smutsig eller om den delas mellan olika användare. OrCam rekommenderar att du rengör din OrCam, speciellt kameranlinsen, minst varannan vecka. Rör aldrig kameranlinsen med fingret. Rengör endast linsen med den medföljande mikrofiberduken och glasögonrengöringsmedel. Använd inga slipande material eftersom det kan skada OrCam. Utsätt inte enheten för kemikalier som hushållsrengöringsmedel, aerosolsprayer, lösningsmedel, alkohol eller ammoniak eftersom de kan skada OrCam.

Villkor.

Din användning av din OrCam ("Produkt") är föremål för användarvillkoren som finns på [orcaml.com/terms-and-conditions](https://www.orcam.com/terms-and-conditions). Godkännande av dessa användarvillkor är ett villkor för användning av produkten. Läs hela manualen, inklusive viktig säkerhetsinformation, innan du använder OrCam. ANVÄND INTE OrCam förrän du har fått personlig träning eller onlineutbildning från ett auktoriserat OrCam Trainer™ eller OrCam-träningsprogram. OrCam ansvarar inte om produkten har använts på annat sätt än i enlighet med instruktionerna i manualen. Produkter bör inte användas under förhållanden som är potentiellt livshotande eller kan leda till ekonomisk förlust. I synnerhet bör OrCam inte användas när du kör eller använder tunga maskiner. OrCam ansvarar inte om produkterna används i sådana situationer. OrCam kan ta emot information från tredje part (t.ex. matstreckkoder i vissa länder). OrCam har fått streckkodsdata för australiensisk och nyzeeländsk mat från GS1 Australia. OrCam ansvarar inte för eventuella felaktigheter i streckkodsinformationen som erhållits från tredje part.

Integritetspolicy.

OrCam respekterar din rätt till integritet, och vi är angelägna om att skydda och säkra personlig information om våra kunder och användare. Läs vår integritetspolicy på <https://www.orcam.com/privacy-policy/>, som beskriver hur vi behandlar personlig information om våra kunder och användare i samband med de tjänster vi tillhandahåller, vår webbplats och OrCam Reads mobilapplikation ("Applikationen" respektive "Tjänsterna") vi samlar in och behandlar personuppgifter, för vilka ändamål vi använder och behandlar dina personuppgifter, hur dina personuppgifter skyddas och till vem din personliga information kan komma att delas. Det är viktigt för oss att berätta om vår integritetspolicy och dina rättigheter angående de personuppgifter vi har om dig. Du bör också vara medveten om att vi använder cookies och liknande tekniker för att samla in och lagra information när du besöker vår webbplats, som finns på www.orcam.com, så att vi kan ge dig bästa möjliga upplevelse. För mer information, se vår cookiepolicy nedan på <https://www.orcam.com/sv/cookies-policy/>. Om du känner att dina integritetsproblem inte har behandlats i sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på privacy@orcaml.com. Om du väljer att

ladda ner eller använda applikationen, kontakta, registrera eller tillhandahålla information till oss i samband med Tjänsterna samtycker du uttryckligen till användningen av sådan information i enlighet med denna integritetspolicy. Du får inte använda tjänsterna eller skicka information till oss om du inte godkänner något av villkoren nedan. Denna sekretesspolicy ska inte tolkas som ett avsteg från användarvillkoren eller något annat avtal mellan OrCam och dig.

Garanti.

Du samtycker till att, förutom vad som uttryckligen anges här, OrCam inte ger några utfästelser eller garantier med avseende på Produkten, dess funktioner eller några bilder som produceras av den. OrCams begränsade produktgaranti för slutanvändare ("Begränsad garanti") skyddar ägaren av OrCam-produkten från defekter i material eller utförande vid tidpunkten för det ursprungliga köpet under nästa (1) år och eventuell tillämplig lagstadgad ytterligare garantiperiod.

Originalbeviset på köp/leverans krävs från ägaren för att få detta skydd. OrCam kommer, efter eget val, att reparera eller byta ut alla produkter som OrCam bedömer omfattas av denna begränsade garanti. OrCam ska inte hållas ansvarigt för några omständigheter som uppstår till följd av avsiktlig skada eller missbruk av produkten. Ägaren är ansvarig för kostnaden för att skicka produkten till den plats som utsetts av OrCam. Denna begränsade garanti är den enda och exklusiva garantin som gäller för OrCam-produkter. Ingen tredje part har rätt att göra någon representation, garanti eller överenskommelse å OrCams vägnar med avseende på OrCams produkter. OrCam lämnar inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, annat än vad som uttryckligen anges häri. OrCam ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några speciella, oförutsedda, följdskador, oförutsedda, följdskador eller indirekta skador som uppstår ur eller i samband med användningen av denna produkt. Under inga omständigheter ska OrCams ansvar överstiga det pris som betalats för produkten. Utan att begränsa ansvarsbegränsningen enligt detta avtal på något sätt, ska den begränsade garantin som anges häri inte gälla och ägaren ska inte ersättas av OrCam för några kostnader eller utgifter i följande fall:

- (i) produkten har använts på annat sätt än i enlighet med produktdokumentationen och användarvillkoren eller andra skriftliga instruktioner från OrCam
- (ii) produkten har utsatts för manipulering, missbruk, vårdslöshet eller olycka
- (iii) identifieringsetiketterna på produkten eller delarna har tagits bort eller produkten på annat sätt har ändrats
- (iv) produkten har öppnats, modifierats, reparerats, servas, underhållits eller modifierats av en icke-auktoriserad OrCam-representant;
- (v) produkten är ansluten till programvara, datorhårdvara eller annan utrustning som inte tillhandahålls av OrCam eller inte har godkänts skriftligen av en auktoriserad OrCam-representant;
- (vi) produkten har avsiktligt skadats eller utsatts för vatten, värme eller högspänning;
- (vii) produkten har använts av en person som inte har utbildats av en auktoriserad OrCam Trainer™-tränare. Alla delar som byts ut under denna garanti garanteras under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller nittio (90) dagar från reparationsdatumet, beroende på vilket som är längst. Registrera din enhet för garanti på garantiregistreringswebbplatsen på: <https://discover.orcam.com/warranty>. Om du misstänker att din produkt behöver garantisupport, kontakta support@orcaml.com. Du står för fraktkostnaderna. Men om garantianspråket fastställs

vara giltigt kommer OrCam att betala alla fraktkostnader för den reparerade eller utbytta produkten.

ORCAM FRÅSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ICKE INTRÄNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE MED TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. ORCAM GARANTERAR INGEN GARANTI ATT PRODUKTEN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER VIRUSFRI ELLER OAVBRUTEN, ATT BILDERNA ELLER LJUDET SOM PRODUCERAS AV PRODUKTEN ÄR AVSTÄNGD ELLER AVSTÄNGD, ELLER DENNA DEL SKA IMPLEMENTERAS I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Återbetalningspolicy.

Den oskadade enheten kan returneras för återbetalning inom den tid som krävs enligt lokal lag eller enligt överenskommelse med OrCam vid köptillfället. Träningsavgifter är ej återbetalningsbara. Kontakta din lokala representant eller OrCam Support för att påbörja återbetalningsprocessen. Om du lämnar tillbaka din OrCam, följ instruktionerna i OrCams support noggrant. Enheten måste vara i samma skick som när den togs emot och får inte skadas på något sätt. Returen och behandlingen kan variera beroende på hur enheten köptes, dess skick och hur länge enheten har använts. Returen kommer endast att behandlas av OrCam efter att transportören har tagit emot enheten och levererat den till OrCam. Det kommer att ta cirka tre veckor att få enheten (internationella försändelser med lokal tullklarering kan ta längre tid), varefter OrCam kommer att behandla returen. När OrCam väl har krediterat återbetalningen kan det fortfarande ta lite tid för banken att överföra pengarna till ditt konto. För kreditkortsbetalningar kan denna fördröjning vara 5-10 arbetsdagar. Om du har några frågor, vänligen kontakta OrCam Support.

FCC-efterlevnad.

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna.

Användning är föremål för följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.
2. Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

FCC-varning.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda denna utrustning.

OBS: TILLVERKAREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA RADIO- ELLER TV-STÖRNINGAR SOM RESULTAT FRÅN ICKE AUKTORISERADE MODIFIKATIONER AV DENNA UTRUSTNING. SÅDANA MODIFIKATIONER KAN Ogiltigförklara DIN ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN.

Uppfyller direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Kontakta OrCam för korrekt avfallshantering.



RoHS: RoHS-kompatibel (material och komponenter)

RoHS

FCC ID: 2AAWI-READ



CE: Uppfyller CE-kraven



Se bruksanvisningen



OrCam auktoriserad representant i EU:

Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen,

60549 Frankfurt am Main, Tyskland

Telefon: +49 69 95932-5090

Storbritannien Ansvarig: MEDES LIMITED

5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett,

Hertfordshire, London WD7 7AR, Storbritannien

medes@arazygroup.com

Tillämpliga standarder.

OrCam Read överensstämmer med bilaga VII till direktiv 93/42/EEG och direktiv 2007/47/EEG om medicintekniska produkter och uppfyller de väsentliga kraven som beskrivs i bilaga 1.

Tillämpliga standarder: EN IEC 60601-1. ETSI EN 301 489-1. ETSI EN 301 489-17. Del 15 av FCC-reglerna, del B. IEC / EN 60601-1-6. IEC 62366-1: 2015. EN IEC 60601-1-2.

EN 62304. RoHS-direktiv 2011/65 / EU. WEEE. EN ISO 14971:2016. Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter.